

ANVÄNDARMANUAL

DUAL TULIP

HR-Chitosan hemostatisk tamponad för gynekologi



Varumärke	DUAL TULIP V
Artikelnummer	EV DTV0220200P
Storlek	Tamponad Ø 2,0 x 4,5 cm
Förpackning	10 st/förpackning
Tillverkare	Endovision
Distributör i Sverige	Apgar Sverige AB

För sjukvårdspersonal

1 Indikation

DUAL TULIP används för att stoppa blödning efter konisering, biopsi eller liknande gynekologiska ingrepp. Produkten placeras med fysisk kompression direkt på blödningsstället.

DUAL TULIP kan även användas för tillfällig behandling under operation, postoperativt samt vid kirurgiska sår.

2 Förberedelse före användning


1. Får inte användas om förpackningen har skadats. Kontrollera förpackningen med avseende på skador innan användning.
2. Ansvarig läkare ska vara fullt införstådd med produktens kliniska indikationer och kontraindikationer.
3. Patienten ska få bruksanvisning och förhållningsregler av behandlande läkare inför användning av produkten.
4. Öppna förpackningen och kontrollera att tråden sitter ordentligt fast innan DUAL TULIP appliceras.

3 Bruksanvisning

Efter konisering, biopsi eller liknande ingrepp: lokalisera blödningsstället och applicera DUAL TULIP direkt på det.

Så här applicerar du DUAL TULIP

1. Häll cirka 50–80 ml koksaltlösning i en behållare eller glasbägare, och doppa därefter DUAL TULIP i koksaltlösningen i ett par sekunder.
2. Placera spekulum, för in DUAL TULIP i vaginalöppningen och applicera den försiktigt på det blödande området med lätt tryck.
3. Säkerställ att DUAL TULIP är korrekt placerad på blödningsstället, och kontrollera att tråden sticker ut cirka 4–5 cm utanför vaginalöppningen.

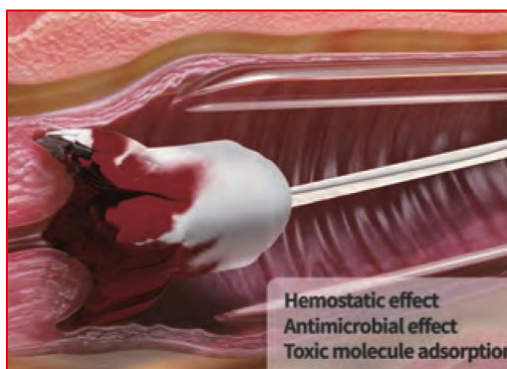

Hemostatisk, Antibakteriell, Antiinflammatorisk

Så här avlägsnar du DUAL TULIP

Dra långsamt i tråden efter 4–8 timmar för att avlägsna DUAL TULIP från det behandlade området.

- Vid stor blödningsmängd ska produkten bytas ut för patientens välbefinnande.
- Vid risk för ytterligare blödning ska en ny produkt användas enligt samma instruktion.

Om komplikationer uppstår

- Om blödningen fortsätter utanför vagina under användning av DUAL TULIP, kontakta behandlande läkare eller närmaste sjukhus.
- Om hela produkten inte följer med ut tillsammans med den fastsittande tråden, kontakta behandlande läkare eller närmaste sjukhus.

4 Varningar

VIKTIGT

- Denna produkt är icke-absorberbar och får därför inte lämnas kvar i kroppen.
- Läs instruktionerna noggrant innan användning och använd DUAL TULIP i enlighet med denna bruksanvisning.

5 Försiktighetsåtgärder

1. Produkten är steril och får inte användas om förpackningen har öppnats eller skadats.
2. Endast för engångsbruk. Får inte omsteriliseras eller återanvändas.
3. Använd inte produkter vars utgångsdatum har passerat.
4. Om blödningen fortsätter utanför slidan under användning av DUAL TULIP, kontakta behandlande läkare eller närmaste sjukhus.
5. Om hela produkten inte följer med ut tillsammans med den fastsittande tråden, kontakta behandlande läkare eller närmaste sjukhus.

6 Förvaring och bortskaffande efter användning

1. Produkten ska förvaras i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus.
2. Endast för engångsbruk. Får inte omsteriliseras eller återanvändas.
3. Produkten är icke-absorberbar och ska avlägsnas helt från applikationsstället.
4. Efter användning kasseras produkten som vanligt restavfall.

7 Kontaktinformation

Vid frågor om DUAL TULIP eller övriga produkter från Apgar, kontakta oss gärna:

Apgar Sverige AB

Box 25
741 21 Knivsta

Kontaktuppgifter

Ordertelefon: 042-24 21 00
E-post order: order@apgar.se
E-post: info@apgar.se
www.apgar.se

Öppettider: Mån–tors 08:00–17:00, fredag 08:00–16:00

8 Tillverkare och EU-representant

Uppgifter enligt IFU-krav om tillverkare och EU-representant för DUAL TULIP:



ENDOVISION Co., Ltd.

66-26, Dongnae-ro, Dong-gu, Daegu, Rep. of Korea (41061)

T.+82.53.751.1955 F.+82.53.751.1964

E-mail: info@endovision.co.kr / www.endovision.co.kr



JaviTech e.K.

Sachsenhausener Straße 16, 65824 Schwalbach am Taunus

Germany T. +49 6196 4021549 Email: info@javitech.de

Certifieringar



ISO 13485:2016 – certifierat kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter · CE 0068 – CE-märkning med anmält organs
identifikationsnummer · GMP – tillverkad enligt god tillverkningsledning